




User Manual

CGM ESA-AD1101

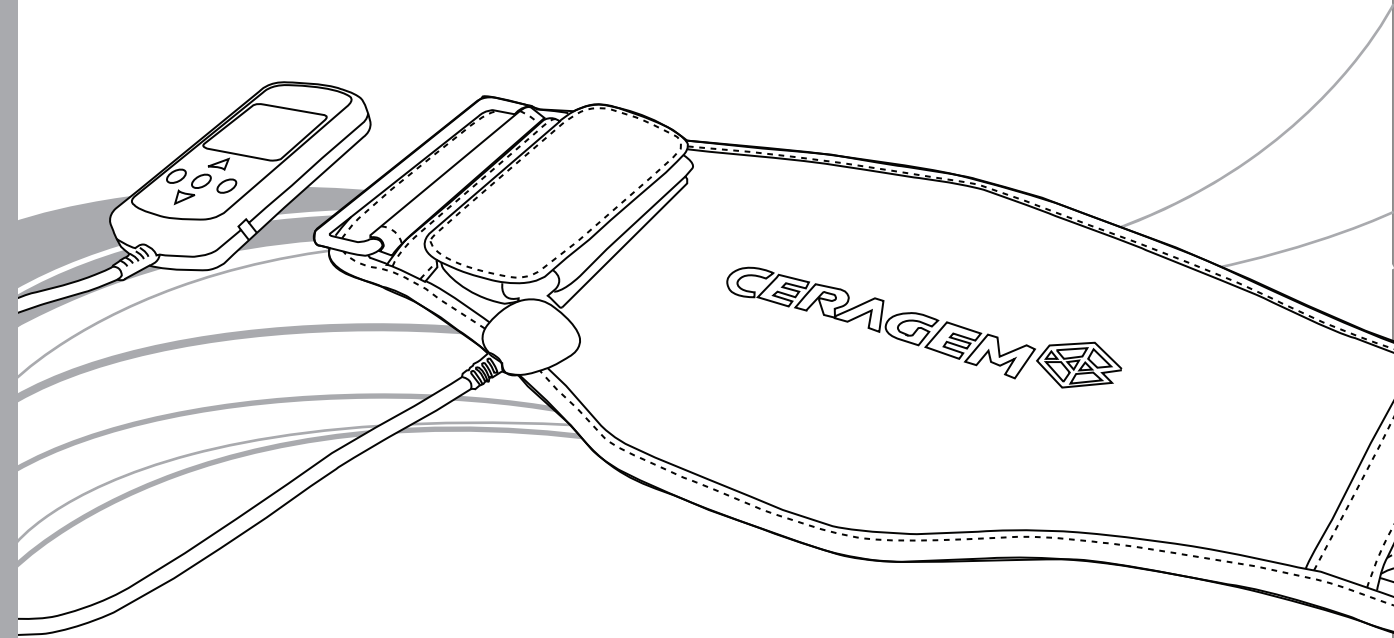

Seller

CERAGEM CO., LTD.

177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 331-831, KOREA
Tel : (82)41-523-2550 Fax : (82)41-523-2560
Homepage : <http://www.ceragem.net>

manufacturer

KUKDONG ELECTRONICS CO., LTD.

#411, 5Ra, Shihwa Industrial Complex, 673-17,
Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA
Tel : (82)31-497-3356,3354 Fax : (82)31-497-3369

Please read this manual thoroughly for your safety.
Keep the manual in a safe place after reading it for future reference.






What is Slim Belt?


Slim Belt is a compact electronic physical massage machine for home use. Most today's people suffer from adult and chronic diseases due to irregular diet, various pollutions and stress. Though many of them try an exercise, dietary treatment, healthcare program or physiotherapy, it is hard to maintain it because of cost or space limitations. Slim Belt is a compact, multi-function electronic physical massage machine that you can use conveniently in your own home.

- Easy and convenient to use
- No danger of electricity and side effects
- No need to replace batteries thanks to the rechargeable battery.
- User-friendly directions on easy-to-read LCD screen
- Various massage effects with 3-channel massage functions.
- Best A/S service

Contents

1. Product Specifications and Components	2
2. Cautions for Using Slim Belt	3
3. How to Use Slim Belt's Controller	4
4. How to Use Controller Buttons	6
5. How to Use Rechargeable Battery	7
6. Precautions for Safe Use	8
7. Home Maintenance	9
8. Product Warranty	10

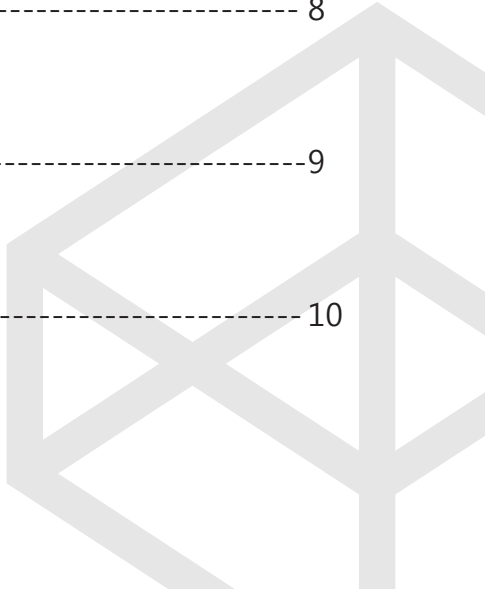

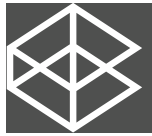

1. Product Specifications and Components

Product Name	Slim Belt
Model	CGM ESA-AD1101
Display	Liquid crystal display (39 x 40 mm)
Frequency	1~200Hz
Application	Constant voltage type
Rated Voltage	DC3.7V (Li-Ion rechargeable battery)
Classification	Embedded power type
Operation Time	5~60 minutes
Operation Mode	1~6 levels
Polarity Reversal	Automatic polarity reversal LCD
Size	Controller (56 x 118 x 19 mm) Slim Belt (490 x 200 x 10mm)
Weight	1.1 kg (including box)
Components	Slim Belt (including controller) 1ea Pouch 1ea Recharging adaptor 1ea User's manual/warranty 1 copy



2. Cautions for Using Slim Belt

When to Use

We recommend using Slim Belt between meals or (more than 1 hour) after a meal but not on an empty stomach. Slim Belt is most effective after a bath.

Cautions for Using

Application of electric current to the same location for extended periods may cause fatigue. Please note that use of electric current stronger than recommended current settings may reduce its effectiveness.

Period to Use

For optical effect, use Slim Belt for 20~30 minutes 1~2 times daily. Reduce the time of use by 1/2 for beginners or 1/3 if you are suffering from low blood pressure, anemia or in a weak condition.

Overuse, especially during initial application, may cause fatigue or temporary elevation of body temperature.

For Minors (Children)


Minors (children) may use it but at lower settings and for shorter times.

- Under 3: Not recommended.
- 3~6 years old: Adjust intensity and time to 1/2 of recommendations for adults.
- 7~12 years old: Adjust intensity and time to 2/3 of recommendations for adults.
- Over 13: Follow recommended intensity and time for adults.




3. How to Use Slim Belt's Controller

Controller

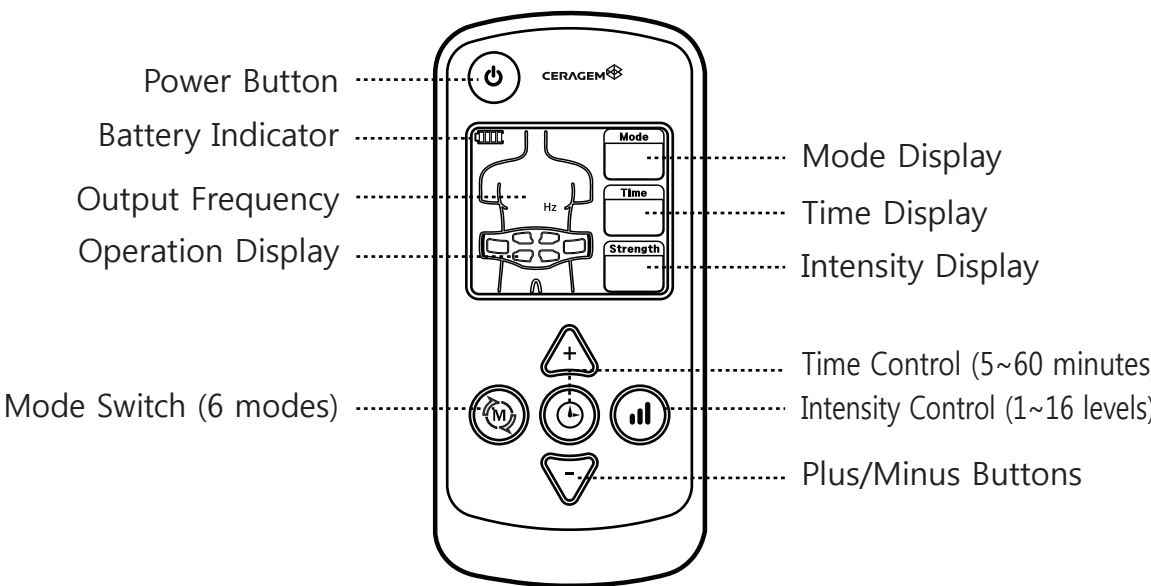

Ergonomically Designed Program and Pad

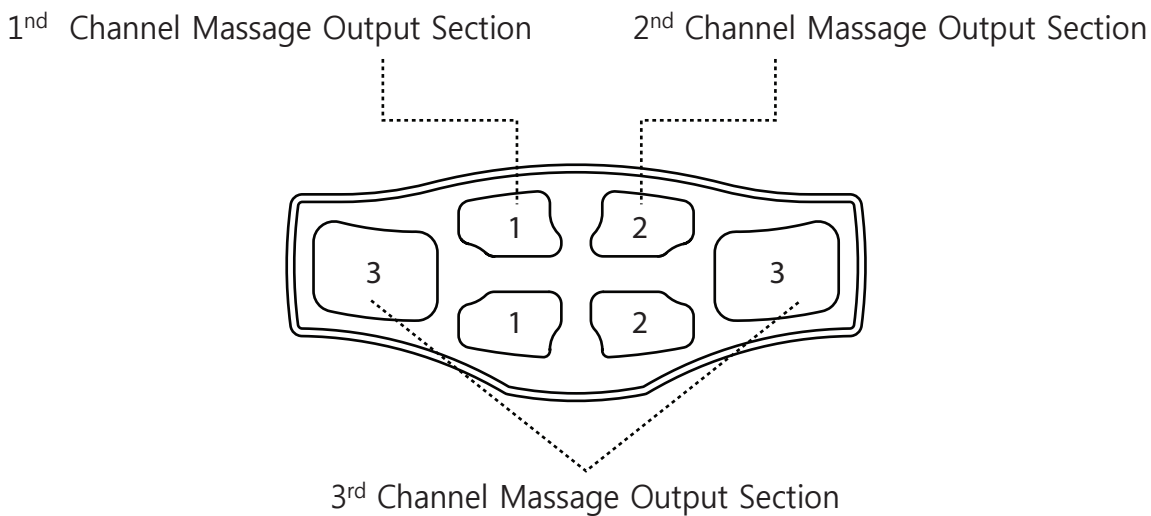

3. How to Use Slim Belt's Controller

Power Button

- When the power is off, press and hold the power button (for more than 1 second); it will beep once and the power will be turned on.
- When the power is on, press and hold the power button (for more than 1 second); it will beep twice and the power will be turned off.

Battery Indicator

- Indicates current battery status.

Time Display

- Indicates remaining operation time.

Output Frequency

- Indicates current frequency.

Mode Display

- Indicates current mode.

Operation Display

- Indicates location of operating pad (channel).

Intensity Display

- Indicates current output intensity.



4. How to Use Controller Buttons

1. Time Control (5~60 minutes)
1. Press the time button () once; the product will beep and the current time will flicker for 5 seconds.

2. You can change time by pressing plus/minus buttons ( ).

3. The product will be turned off automatically after the selected time.
2. Intensity Control (1~16 levels)
1. Press the intensity button () once; the product will beep and the current intensity level will flicker for 5 seconds.

2. You can change output intensity to 1~16 levels by pressing plus/minus buttons ( ).
3. Mode Switch (6 modes)
1. Press the mode button () once; the product will beep and the current mode number will flicker for 5 seconds.

2. You can change MODE to 1~6 by pressing plus/minus buttons ( ).
(Pressing MODE button repeatedly also change the mode.)

Mode 1	Cycle mode 2~6	Mode 2	Fast beat
Mode 3	Slow beat	Mode 4	Beat
Mode 5	Fast beat 2	Mode 6	Massage



5. How to Use Rechargeable Battery

1. Specifications of rechargeable battery
- Battery : Li-Ion


Operating Voltage : 3.7 V

Recharging Capacity: 1,200 mA

Recharging Voltage : 4.2 V
2. Recharging adaptor
- Input Voltage : AC100-240 V

Output Voltage : 4.2 V

Output Current : 1,000 mA
3. How to recharge
- If the power of Slim Belt is insufficient or turned off, recharge it as the following diagram.

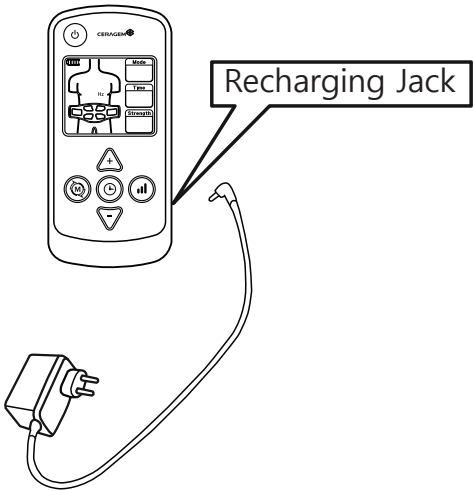

- Connect the recharging adaptor to the side of adjustor. The LED lamp of the recharging adaptor will flicker in red.
- When fully charged, the LED lamp will flicker in green.
- [Recharging Time: about 3 hours]



6. Precautions for Safe Use



Caution

The cautions contained in this manual indicate a potentially hazardous situation that may cause minor injury or property damage.



Caution


1. Do not use this product with the following medical electronic equipment.
 - Medical equipment inserted into body such as pacemaker
 - Life support equipment such as heart-lung machine
 - Mounted type medical equipment such as cardiograph
 - Other similar medical electronic equipment.
2. Consult your doctor before using Slim Belt if you:
 - have a heart disease / acute disease / malignant tumor / high fever
 - have a perception disorder / are pregnant / have a skin disease where Slim Belt will be applied.
 - have been recommended by a doctor not to use this product.




1. When not in use, replace in the original container and store in a safe place.



2. Do not attempt to dismantle, repair or modify this product.

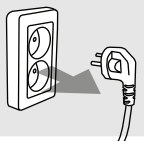

3. Always turn off the power after use.

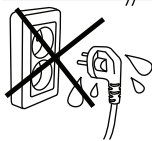

4. Do not touch the power cord with wet hands.



5. Do not wash the product with benzene, thinner or acetone.



6. Prevent children from sucking or playing with this product when it is turned on.



7. Home Maintenance

1. LCD is not turned on.

Battery is discharged or not connected properly.

- Recharge or replace the battery.

2. Failure to feel stimulus.

Battery is discharged or adhesive pad is dead.

- Apply the resolution specified in No. 1.

3. Stimulus is weak or the product stings.

Adhesion surface of pad is dirty or contaminated severely.

- Clean the adhesive pad with a wet towel before use. Adhesive pad is not attached to the body completely.
- Spread massage gel or water evenly on the surface of adhesive pad.
- Please call A/S center

4. Stimulus is weak or unfelt even at a high intensity.

- Clean the adhesive pad with a wet towel before use.
- Apply the resolution specified in No. 3.

5. Power becomes weaker after 1 month.

Battery becomes weak.

- Apply the resolution specified in No. 1.

Your body becomes accustomed to the stimulus.

- Increase the intensity.



8. Product Warranty

Warranty

Product Name: Slim Belt
Model: CGM ESA-AD1101

Year/Month/Day of Purchase			
Place of Purchase			
Warranty Period		1 year from the date of purchase	
Customer Information	Name	Contact	
	Address		

This product is manufactured and tested by thorough product quality management standards.
If you experience any spontaneous failure, contact the dealer or our A/S team with this warranty.



Caution

- Bring this warranty because without it, the replacement or repair of the product will be impossible.
- Complete the warranty form on the date of purchase.
- For other questions, please contact the dealer or our A/S center.
- To improve quality, design and product specifications may be changed without notice.

Seller

CERAGEM CO., LTD.

177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 331-831, KOREA
Tel : (82)41-523-2550 Fax : (82)41-523-2560
Homepage : <http://www.ceragem.net>

manufacturer

KUKDONG ELECTRONICS CO., LTD.

#411, 5Ra, Shihwa Industrial Complex, 673-17,
Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA
Tel : (82)31-497-3356,3354 Fax : (82)31-497-3369



MEMO

Spis treści

1. Dane techniczne produktu i jego elementów	2
2. Uwagi dotyczące używania urządzenia Slim Belt	3
3. Obsługa pilota sterującego urządzeniem Slim Belt	4
4. Obsługa przycisków pilota sterującego	6
5. Obsługa akumulatora	7
6. Bezpieczne użytkowanie	8
7. Konserwacja w domu	9
8. Gwarancja produktu	10

Czym jest urządzenie Slim Belt?

Slim Belt to przeznaczone do użytku domowego kompaktowe urządzenie masujące. W dzisiejszym świecie wiele osób cierpi na choroby powodowane nieregularną dietą, różnorodnymi zanieczyszczeniami i stresem. Mimo że wiele osób próbuje ćwiczyć, stosować dietę, uczestniczyć w programach poprawy zdrowia lub fizjoterapii, utrzymanie zdrowia jest trudne z powodu kosztów czy ograniczonej przestrzeni. Slim Belt to wielofunkcyjne, kompaktowe urządzenie masujące, którego można używać w domu.

- Wygodny i łatwy w użyciu
- Brak ryzyka występowania efektów ubocznych oraz porażenia prądem
- Brak konieczności wymiany baterii dzięki zastosowaniu akumulatorów
- Przyjazne użytkownikowi wskazówki na czytelnym ekranie LCD
- Różne typy masażu z funkcjami masażu 3-kanalowego
- Najlepsza usługa serwisowa



1. Dane techniczne produktu i jego elementów

Nazwa produktu	Slim Belt
Model	CGM ESA-AD1101
Wyświetlacz	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (39 x 40 mm)
Częstotliwość	1–200 Hz
Zastosowanie	Napięcie stałe
Napięcie znamionowe	3,7 V DC (akumulator litowo-jonowy)
Klasyfikacja	Wbudowane źródło zasilania
Czas działania	5–60 minut
Tryb działania	1–6 poziomów
Odwrócenie polaryzacji	LCD z automatyczną polaryzacją odwrotną
Wymiary	Pilot sterujący(56 x 118 x 19 mm) Urządzenie Slim Belt (490 x 200 x 10 mm)
Masa	1,1 kg (z opakowaniem)
Elementy	Urządzenie Slim Belt (z pilotem sterującym), 1 szt. Woreczek 1 szt. Ładowarka, 1 szt. Instrukcja obsługi / karta gwarancyjna, 1 kopia



2. Uwagi dotyczące używania urządzenia Slim Belt

Kiedy używać

Zalecamy używanie urządzenia Slim Belt między posiłkami lub conajmniej 1 godzinę po posiłku, ale nigdy nie na pusty żołądek. Działanie urządzenia jest najbardziej efektywne po kąpieli.

Środki ostrożności

Długotrwałe przykładanie prądu elektrycznego do tego samego miejsca może spowodować podrażnienie. Należy zauważyć, że stosowanie natężenia prądu większego niż zalecane może zmniejszyć efektywność działania urządzenia.

Czas używania

W celu uzyskania widocznych efektów, należy używać urządzenia Slim Belt przez 20–30 minut 1–2 razy dziennie. W przypadku początkujących użytkowników należy zmniejszyć czas używania o 1/2. W przypadku osób z niskim ciśnieniem krwi, anemią lub ogólnym słabym stanem zdrowia czas używania należy zmniejszyć o 1/3. Nadmierne użycie, zwłaszcza podczas początkowego stosowania, może spowodować podrażnienie lub tymczasowe podniesienie temperatury ciała.

Osoby niepełnoletnie (dzieci)


Urządzenia mogą używać osoby niepełnoletnie (dzieci), jednak powinny to robić przy niższych ustawieniach i przez krótszy czas.

- Poniżej 3 lat: Niezalecane.
- Od 3 do 6 lat: Należy stosować 1/2 intensywności i czasu w porównaniu do osób dorosłych.
- Od 7 do 12 lat: Należy stosować 2/3 intensywności i czasu w porównaniu do osób dorosłych.
- Powyżej 13 lat: Należy stosować intensywność i czas taki jak w przypadku osób dorosłych.




3. Obsługa pilota sterującego urządzenia Slim Belt

Pilot sterujący

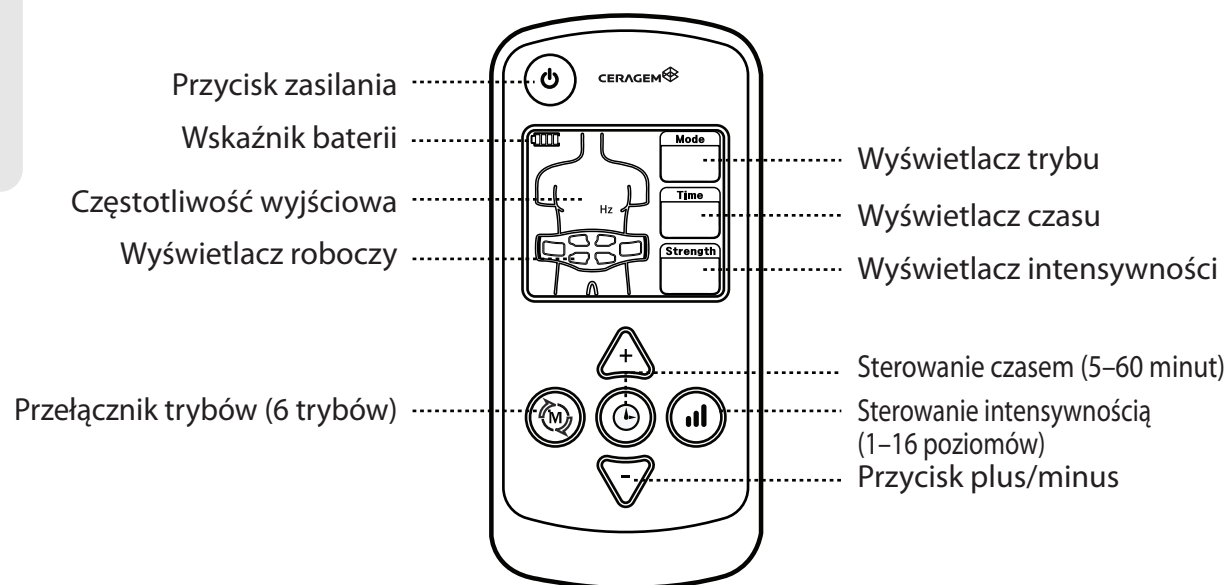

Ergonomicznie zaprojektowane przyciski programowania i panel

Sekcja wyjściowa masażu kanału 1 Sekcja wyjściowa masażu kanału 2

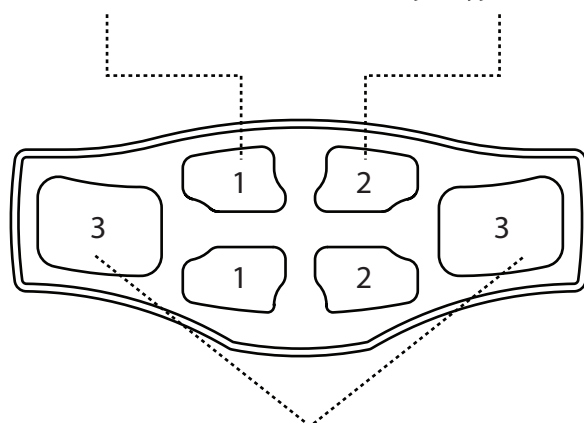

Sekcja wyjściowa masażu kanału 3



3. Obsługa pilota sterującego urządzenia Slim Belt

Przycisk zasilania

- Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (dłużej niż 1 sekundę). Zostanie wyemitowany pojedynczy dźwięk i zasilanie włączy się.
- Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (dłużej niż 1 sekundę). Zostaną wyemitowane dwa dźwięki i zasilanie wyłączy się.

Wskaźnik baterii

- Informuje o bieżącym stanie baterii.

Wyświetlacz czasu

- Informuje o pozostałym czasie działania.

Częstotliwość wyjściowa Hz

- Informuje o bieżącej częstotliwości.

Wyświetlacz trybu

- Informuje o bieżącym trybie.

Wyświetlacz roboczy

- Informuje o lokalizacji działającej części panelu(kanału).

Wyświetlacz intensywności

- Informuje o bieżącej intensywności wyjściowej.



4. Obsługa przycisków pilota sterującego

1. Sterowanie czasem (5–60 minut)

1. Naciśnij przycisk czasu (⌚) jeden raz. Urządzenie wyemituje dźwięk i bieżący czas będzie migać przez 5 sekund.
2. Czas można zmienić przyciskami plus/minus (+/-).
3. Po ustawionym czasie urządzenie automatycznie się wyłączy.

2. Sterowanie intensywnością (1–16 poziomów)

1. Naciśnij przycisk intensywności (📶) jeden raz. Urządzenie wyemituje dźwięk i bieżący poziom intensywności będzie migać przez 5 sekund.
2. Poziom intensywności wyjściowej (od 1 do 16) można zmienić przyciskami plus/minus (+/-).

3. Przełącznik trybów (6 trybów)

1. Naciśnij przycisk trybu (Ⓜ) jeden raz. Urządzenie wyemituje dźwięk i bieżący tryb będzie migać przez 5 sekund.
2. TRYB (od 1 do 6) można zmienić przyciskami plus/minus (+/-).
(TRYB można również zmienić, naciskając kilkakrotnie przycisk wyboru trybu).

Tryb 1	Przełączanie trybów 2–6	Tryb 2	Szybkie uderzenia
Tryb 3	Wolne uderzenia	Tryb 4	Uderzenia
Tryb 5	Szybkie uderzenia 2	Tryb 6	Masaż



5. Obsługa akumulatora

1. Specyfikacje akumulatora

Akumulator:	Litowo-jonowy
Napięcie robocze:	3,7 V
Pojemność ładowania:	1200 mA
Napięcie ładowania:	4,2 V

2. Ładowarka

Napięcie wejściowe:	100–240 V AC
Napięcie wyjściowe:	4,2 V
Prąd wyjściowy:	1000 mA

3. Ładowanie

Jeśli moc urządzenia Slim Belt jest niewystarczająca lub nie da się go włączyć, należy go naładować zgodnie z poniższą ilustracją.



- Podłącz ładowarkę do gniazda z boku kontrolera. Kontrolka LED ładowarki zacznie migać na czerwono.
- Po pełnym naładowaniu kontrolka LED zacznie migać na zielono.
[Czas ładowania: ok. 3 godziny]



6. Bezpieczne użytkowanie



Przeostroga

Środki ostrożności zawarte w tej instrukcji mają zapobiec ewentualnemu ryzyku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji dla zdrowia i uniknięcia uszkodzeń urządzenia.



Przeostroga


1. Niniejszego produktu nie wolno używać z następującym elektronicznym sprzętem medycznym:
 - Sprzęt medyczny umieszczony w ciele, na przykład rozrusznik serca,
 - Sprzęt podtrzymujący funkcje życiowe, na przykład pompa podtrzymująca pracę serca i płuc,
 - Podłączany sprzęt medyczny typu kardiograf,
 - Inne urządzenia o podobnych funkcjach.
2. Przed rozpoczęciem używania urządzenia Slim Belt, należy skonsultować się z lekarzem w następujących przypadkach:
 - choroby serca, choroby o ostrym przebiegu, nowotwory złośliwe, wysoka gorączka;
 - zaburzenia percepcji, ciąża, choroba skóry w miejscu stosowania urządzenia Slim Belt;
 - zalecenie lekarza, aby nie używać niniejszego produktu.




1. Gdy produkt nie jest używany, należy go schować do oryginalnego opakowania i odłożyć w bezpieczne miejsce.



2. Nie wolno podejmować prób rozmontowania, naprawy ani modyfikacji niniejszego produktu.

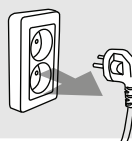

3. Zawsze należy wyłączyć zasilanie po użyciu.

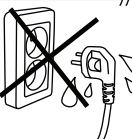

4. Nie wolno dotykać kabla zasilającego wilgotnymi dłońmi.



5. Produktu nie wolno myć benzenem, rozcieńczalnikiem ani acetonem.



6. Uważać, aby dzieci nie ssały niniejszego produktu ani nie bawiły się nim, gdy jest włączony.



7. Konserwacja w domu

1. Ekran LCD nie jest włączony.

Akumulator jest rozładowany lub nieprawidłowo podłączony.

- Naładuj lub wymień akumulator.

2. Nie czuć stymulacji.

Akumulator jest rozładowany lub panel jest uszkodzony.

- Zastosuj rozwiązanie opisane w punkcie 1.

3. Stymulacja jest słaba lub czuć klucie.

Powierzchnia panelu jest zanieczyszczona.

- Przed użyciem oczyść powierzchnię panelu wilgotnym ręcznikiem.
- Panel nie przylega całkowicie do ciała.
- Równomiernie nałóż żel do masowania lub wodę na powierzchnię panelu.
- Zadzwoń do centrum serwisowego.

4. Stymulacja jest słaba lub niewyczuwalna nawet przy dużej intensywności.

- Przed użyciem oczyść panel wilgotnym ręcznikiem.
- Zastosuj rozwiązanie opisane w punkcie 3.

5. Moc słabnie po 1 miesiącu.

Zmniejsza się moc akumulatora.

- Zastosuj rozwiązanie opisane w punkcie 1.

Ciało przyzwyczało się do stymulacji.

- Zwiększ intensywność.



8. Gwarancja produktu

Gwarancja

Nazwa produktu: Slim Belt

Model: CGM ESA-AD1101

Rok/miesiąc/dzień zakupu				
Miejsce zakupu				
Okres gwarancji		1 rok od daty zakupu		
Informacje o kliencie	Nazwisko		Kontakt	
	Adres			

Niniejszy produkt wyprodukowano i przetestowano zgodnie z rygorystycznymi normami zarządzania jakością produktu. W razie jakiegokolwiek usterki należy się skontaktować ze sprzedawcą lub zespołem serwisowym i pokazać niniejszą kartę gwarancyjną.



Przestroga

- Należy zachować kartę gwarancyjną, gdyż w przeciwnym razie wymiana lub naprawa produktu nie będzie możliwa.
- Kartę gwarancyjną należy uzupełnić w dniu zakupu.
- Wszelkie inne pytania należy kierować do sprzedawcy lub naszego centrum serwisowego.
- W celu poprawy jakości, konstrukcja i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Sprzedawca

CERAGEM CO., LTD.

177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 331-831, KOREA
Tel.: (82)41-523-2550 Faks: (82)41-523-2560
Strona główna : <http://www.ceragem.net>

Producent

KUKDONG ELECTRONICS CO., LTD.

KORDON ELECTRONICS CO., LTD.
#411, 5Ra, Shihwa Industrial Complex, 673-17,
Seonggok—dong, Danwon—gu, Ansan—si, Gyeonggi—do, KOREA
Tel.: (82)31-497-3356, 3354 Faks: (82)31-497-3369

CERAGEM 

NOTATKI

Kas yra Slim Belt?

Slim Belt tai nedidelis elektroninis masažo prietaisas, skirtas buitiniam naudojimui. Šiais laikais dauguma žmonių dėl oro taršos, patiriamo streso ir netaisyklingos mitybos vis dažniau suserga lėtinėmis ligomis. Nors daugelis iš mūsų stengiasi įgyti kuo sveikesnius mitybos įpročius, gyventi sveiką gyvenimo būdą arba naudotis fizioterapija, tačiau tai pakankamai sudėtinga, kadangi trūksta lėšų, erdvės ir svarbiausia - laiko. Slim Belt yra nedidelis, daugiafunkcinis elektroninis masažo prietaisas, kurį gali lengvai naudoti neišeinant iš namų.

- Paprastas ir lengvas naudoti;
- Nėra elektros šoko arba šalutinio poveikio rizikos;
- Nėra reikalo keisti baterijas - prietaisas turi daugkartinio naudojimo įkraunamąją bateriją (akumuliatorių);
- Ryškiaje LCD ekrane aiškiai matomos instrukcijos;
- Įvairių rūšių masažas per 3 kanalų dažnį;
- Geriausias garantinis aptarnavimas.

Turiny s

1. Produkto specifikacijos ir sudedamosios dalys -----	2
2. Atsargumo priemonės naudojantis Slim Belt -----	3
3. Kaip naudotis Slim Belt valdymo pultu -----	4
4. Kaip naudotis valdymo pulto mygtukais -----	6
5. Kaip naudotis baterija -----	7
6. Saugaus elgesio taisyklės -----	8
7. Priežiūra -----	9
8. Garantija -----	10



1. Produkto specifikacijos ir sudedamosios dalys

Produkto pavadinimas	Slim Belt
Modelis	CGM ESA-AD1101
Ekranas	LCD ekranas (39 x 40 mm)
Dažnis	1~200Hz
Naudojimas	Įtampa
Nominali įtampa	DC3.7V (ličio jonų baterija - akumulatorius)
Klasifikacija	Vidinis maitinimo šaltinis
Veikimo trukmė	5~60 minučių
Veikimo režimas	1~6 lygiai
Poliariškumo nesuderinamumas	LCD ekranas su automatiniu poliarizmo atstatymu
Matmenys	Valdymo pultas (56 x 118 x 19 mm) Slim Belt (490 x 200 x 10mm)
Svoris	1.1 kg (įskaitant dėžutę)
Komponentai	Slim Belt (įskaitant valdymo pultą) 1 vnt. Apsauginis krepšys 1vnt. Įkroviklis 1vnt. Vartotojo vadovas / garantija 1 egzempliorius



2. Atsargumo priemonės naudojantis Slim Belt

Kaip naudotis prietaisu

Slim Belt prietaisą rekomenduojame naudoti tarp valgių (ne mažiau, kaip 1 valandą prieš ir po valgio) ar po valgio, bet ne ant tuščio skrandžio. Slim Belt efektyviausias išsimaudžius.

Atsargumo priemonės

Elektros srovės naudojimas ilgą laiką toje pačioje kūno vietoje gali sukelti nuovargį. Prašome atkreipti dėmesį, kad naudojama stipresnė negu rekomenduojama srovė gali sumažinti gydymo efektyvumą.

Naudojimo trukmė

Norėdami gauti matomą poveikį, Slim Belt naudokite maždaug 20-30 minučių ir 1 - 2 kartus per dieną. Pradedantieji naudojimo trukmę turi sumažinti 1/2, o asmenys, kenčiantys nuo žemo kraujospūdžio, anemijos arba silpnumo, naudojimo trukmę turi sumažinti 1/3. Piktnaudžiavimas prietaisu, ypač pradžioje, gali sukelti nuovargį arba laikinai pakelti kūno temperatūrą.

Nepilnamečiai (vaikai)


Nepilnamečiai (vaikai) gali naudotis prietaisu, tačiau šiai naudotojų grupei yra taikomos stiprumo ir trukmės apribojimai.

- Vaikams iki 3 metų naudoti prietaiso nerekomenduojama.
- 3~6 metų vaikai: sumažinkite procedūros intensyvumą ir trukmę (1/2 suaugusiems rekomenduojamas intensyvumas ir trukmė).
- 7~12 metų vaikai: sumažinkite procedūros intensyvumą ir trukmę (2/3 suaugusiems rekomenduojamas intensyvumas ir trukmė).
- Vyresni nei 13 metų vaikai: Procedūros intensyvumas ir trukmė tokia pati kaip ir suaugusiems.




3. Kaip naudotis Slim Belt valdymo pultu

Valdymo pultas

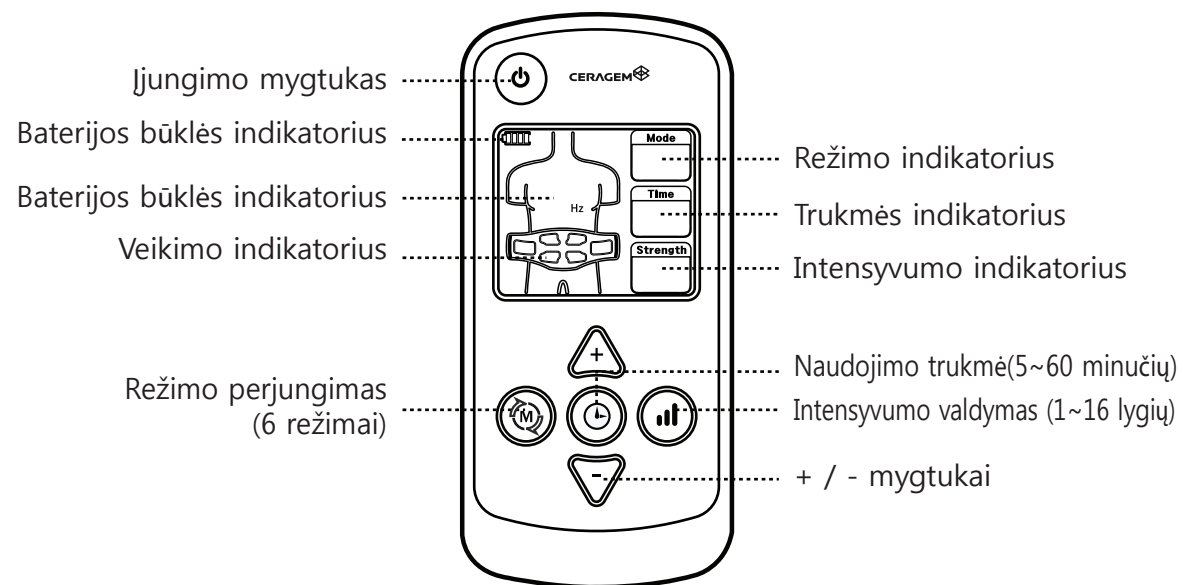

Ergonominis pultas ir tarpiklis

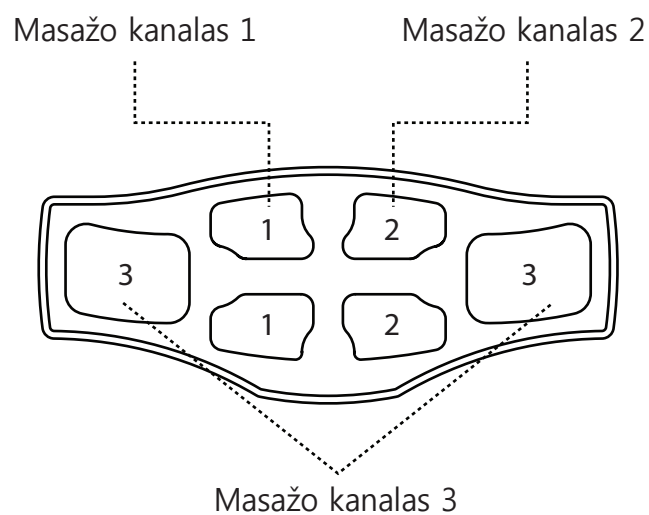

3. Kaip naudotis Slim Belt valdymo pultu

Ijungimo mygtukas

- Kai prietaiso maitinimas išjungtas, laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką (ilgiau nei 1 sekundę), prietaisas vieną kartą pyptelės ir įsijungs.
- Kai prietaiso maitinimas įjungtas, laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką (ilgiau nei 1 sekundę), prietaisas du kartus pyptelės ir išsijungs.

Baterijos būklės indikatorius

- Nurodo akumuliatoriaus įkrovimo būklę.

Trukmės indikatorius

- Nurodo veikimo trukmę.

Išvesties dažnis Hz

- Nurodo esamą dažnį.

Režimo ekranas

- Nurodo esamą režimą.

Valdymo pulto indikatorius

- Nurodo valdymo pulto padėtį (kanalą).

Intensyvumo indikatorius

- Nurodo esamą veikimo intensyvumą.



4. Kaip naudotis valdymo pulto mygtukais

1. Trukmės nustatymas (5- 60 minučių).

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką (); išgirsite garsinį signalą, trukmės nustatymas mirksės 5 sekundes.
2. Trukmę galima keisti spaudžiant mygtukus + / - ( ).
3. Pasibaigus nustatytam laikui prietaisas išsijungia automatiškai.

2. Intensyvumo nustatymas (lygiai nuo 1 iki 16).

1. Vieną kartą nuspauskite intensyvumo reguliavimo mygtuką (); išgirsite garsinį signalą, intensyvumo nustatymas mirksės 5 sekundes.
2. Intensyvumą galima keisti nuo 1 iki 16 lygio, spaudžiant mygtukus + / - ( ).

3. Režimo keitimas (6 režimai).

1. Vieną kartą nuspauskite režimo mygtuką (); išgirsite garsinį signalą, nustatytas režimas mirksės 5 sekundes.
2. Režimą galima keisti nuo 1 iki 6, spaudžiant mygtukus + / - ( ).
(Norėdami pakeisti režimą, keletą kartų spauskite "MODE")

Režimas 1	Cycle mode 2~6	Režimas 2	Greitas ritmas
Režimas 3	Lėtas	Režimas 4	Ritmas
Režimas 5	Greitas rimtas 2	Režimas 6	Masažas



5. Kaip naudotis baterija

1. Baterijos (akumuliatoriaus) specifikacijos:

Akumuliatorius: ličių jonų.

Darbinė įtampa : 3.7 V

Talpa: 1,200 mA

Baterijos įkrovimo įtampa : 4.2 V

2. Įkroviklis:


Įvesties įtampa: AC100-240 V

Išvesties įtampa : 4.2 V

Išvesties srovė : 1,000 mA

3. Kaip įkrauti bateriją (akumuliatorių).

Jeigu Slim Belt nepakanka baterijos arba prietaisas išsijunginėja, įkraukite bateriją vadovaudamiesi žemiau nurodytomis instrukcijomis

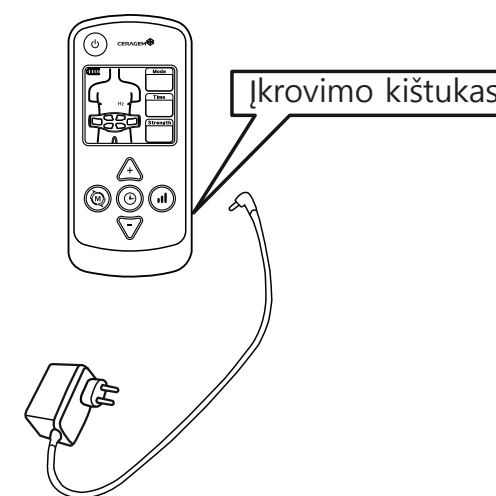

- Prijunkite įkroviklį valdiklio pusėje. LED įkrovimo indikatorius pradės šviesti raudonai.
- Pilnai įkrovus bateriją, indikatoriaus spalva bus žalia.
[Krovimo trukmė: maždaug 3 valandos].



6. Saugaus elgesio taisyklės



Dėmesio

Šiame vartotojo vadove aprašytos saugaus elgesio taisyklės nurodo potencialiai pavojingas situacijas, dėl kurių gali atsirasti lengvos traumos arba žala turtui.



Dėmesio

1. Šio prietaiso negali naudoti su šiais elektroniniais medicinos prietaisais:

- medicinos implantais, pavyzdžiui, širdies ritmo stimulatoriais.
- gyvybės palaikymo prietaisais, pavyzdžiui, širdies - plaučių aparatu.
- ant kūno esančią medicinos įrangą, pavyzdžiui, kardiografą.
- kitus elektroninius medicinos prietaisus.

2. Prieš naudodamiesi Slim Belt pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu:


- kenčiate nuo širdies ligų / ūminių ligų / vėžio / didelio karščiavimo.
- jaučiate silpnumą / esate nėščia / kenčiate nuo kitų odos ligų.
- gydytojas uždraudė naudotis šiuo produktu.




1. Jeigu nenaudojate prietaiso, įdėkite jį į originalią pakuotę ir laikykite saugioje vietoje.



2. Nebandykite savavališkai ardyti, remontuoti arba keisti produkto.

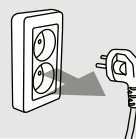

3. Baigę naudotis prietaisu visada atjunkite maitinimą.

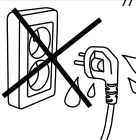

4. Nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis.



5. Neplaukite prietaisu benzinu, skiedikliai arba acetonu.



6. Neleiskite vaikams liesti arba žaisti su įjungtu prietaisu



7. Priežiūra

1. Neįsijungia LCD ekranas.

Išsikrovusi arba neteisingai įdėta baterija.

2. Nejaučiamas prietaiso veikimas.

Žr. 1 punktą.

3. Masažas silpnas arba jaučiate tik dilgčiojimą.

Kontaktinis prietaiso paviršius yra nešvarus arba labai užterštas.

-Nuvalykite prietaisą drėgnu rankšluosčiu.

Tarpiklis ne visiškai telpa ant kūno.

-Ištepkite tarpiklį masažui skirtu geliu arba vandeniu.

-Kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.

4. Jaučiamas netolygus arba silpnas prietaiso veikimo intensyvumas.

-Prieš naudodamiesi prietaisu nuvalykite jį drėgnu rankšluosčiu

-Žr. 3 punktą.

5. Po mėnesio naudojimo sumažėjo prietaiso galia.

Išsikrovusi baterija.

- Žr. 1 punktą.

Jūsų kūnas priprato prie dirgiklių.

-Padidinkite intensyvumą.



8. Produkto garantija

Produkto garantija

Produkto pavadinimas: Slim Belt

Modelis: CGM ESA-AD1101

Pirkimo metai/mėnuo/diena				
Pirkimo vieta				
Garantijos laikotarpis		1 metai nuo pirkimo datos		
Informacija apie klientą	Vardas		Kontaktiniai duomenys	
	Adresas			

Šis produktas buvo pagamintas ir išbandytas laikantis aukščiausių kokybės standartų. Gedimo atveju pasiimkite šią garantiją ir kreipkitės į prietaiso pardavėją arba garantinio aptarnavimo centrą.



- Prašome pateikti garantiją, priešingu atveju negalėsime pakeisti produkto arba suteikti remonto paslaugų.
- Garantijos kortelė turi būti pildoma pirkimo dieną.
- Kilus bet kokiems klausimams, kreipkitės į produkto pardavėją arba garantinio aptarnavimo centrą.
- Siekiant pagerinti kokybę, produkto dizainas ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Gamintojas

CERAGEM CO., LTD.

177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 331-831, KOREA
Tel : (82)41-523-2550 Fax : (82)41-523-2560
Homepage : <http://www.ceragem.net>

Platintojas

KUKDONG ELECTRONICS CO., LTD.

#411, 5Ra, Shihwa Industrial Complex, 673-17,
Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA
Tel : (82)31-497-3356,3354 Fax : (82)31-497-3369



PASTABOS

Lietuvių